

MEDISANA®

RU **Весы электронные индивидуальные PSA**




Art. 40435



Инструкция по применению

Внимательно ознакомиться!

Прибор и управление

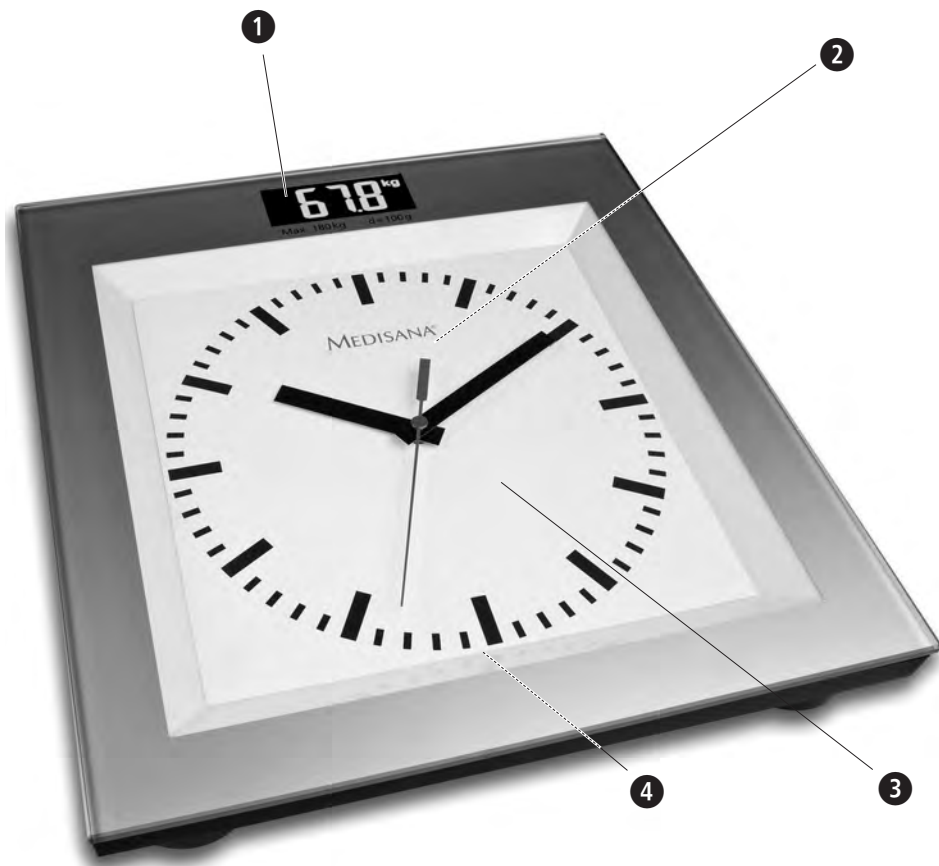

RU

- ❶ Дисплей
- ❷ Отсек для батареек
(на нижней стороне)
- ❸ Платформа
- ❹ Переключатель для
килограмм (KG)
фунт (LB)
стоун (ST)
(на нижней стороне)

RU

Инструкция по применению

1	Указания по безопасности	1
2	Полезные сведения	3
3	Применение	4
4	Разное	6
5	Гарантия	7



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользование прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Пояснение символов



Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



УКАЗАНИЕ

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.



Номер LOT



Производитель

RU 1 Указания по безопасности



Указания по безопасности



- Любое лечение, а также диета для снижения или повышения веса требует квалифицированной консультации соответствующих специалистов (врача, диетолога). Определение индивидуального веса при помощи данных весов будет хорошей ориентировочной базой для такого курса лечения.

- **Внимание! Соблюдайте равновесие, используя весы!**
Никогда не ставьте весы на неровную поверхность.
Никогда не вставайте только на угол весов.
Не вставайте только на одну сторону весов либо на их край.

- **Внимание! Не поскользнитесь на весах!**
Никогда не вставайте на весы мокрыми ногами.
Никогда не вставайте на весы в надетых носках.

- Используйте данный прибор только по его прямому назначению согласно инструкции по эксплуатации.
- При использовании весов не по назначению прилагаемая гарантия будет аннулирована.
- Весы предназначены для домашнего пользования. Они не предназначены для профессионального применения в больницах и прочих медицинских учреждениях.
- Не возобновляйте пользование прибором, если его функции нарушены, а также, если он получил повреждения от удара, упал в воду или сломался.
- Максимальный допустимый вес для данных весов – 180 кг, 400 фунтов/28 st. Не перегружайте весы.

- Поставьте весы на твердую, ровную поверхность. Мягкие, неровные поверхности непригодны для взвешивания и ведут к неверным результатам измерения.

- Поместите весы в помещении с комнатной температурой и нормальной влажностью.

- Предохраняйте весы от попадания на них воды.

- Бережно обращайтесь с весами. Оберегайте их от ударов и сотрясений. Не роняйте весы.

- Не разбирайте весы, иначе гарантия будет аннулирована. Кроме элемента питания данный прибор не содержит деталей, которые могут быть заменены либо отремонтированы потребителем.
- В случае поломки прибора не ремонтируйте его самостоятельно, т. к. при этом гарантия будет полностью аннулирована. Ремонт должен проводиться только имеющими на это соответствующую лицензию станциями техобслуживания.
- Если Вы намереваетесь на продолжительное время прекратить использование прибора, удалите из него элементы питания.

Благодарность

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой!
Купив индивидуальные электронные весы **PSA**, Вы стали владельцем высококачественного продукта от **MEDISANA**. Прибор предназначен для измерения веса людей. Для достижения желаемого успеха и обеспечения длительного срока службы весов **MEDISANA PSA** мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже указания по применению и уходу.

**2.1
Комплектация и
упаковка**

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и отошлите его в сервисный центр. В комплект входят:

- 1 **MEDISANA** Весы электронные индивидуальные **PSA**
- 3 батарейки типа AAA, LR03 1,5 В
- 1 батарейка типа AA, LR6 1,5 В
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушья!

**2.2
Характеристики
прибора**

- Индивидуальные электронные весы со встроенными аналоговыми часами
- Большой ЖК-дисплей с белыми светящимися цифрами на темном фоне
- Диапазон измерения - 180 кг, 396 фунтов или 28 st
- Шаг 0,1 кг или 0,2 фунта
- Единица измерения кг или фунты (- / ST)
- Небьющееся безопасное стекло толщиной 6 мм
- Удобное включение функции измерения веса при наступании на платформу („step-on“)

**2.3
Условия для
достижения
правильных
результатов
измерения**

Точные результаты измерения можно получить только при определенных условиях:

- Всегда измеряйте свой вес при постоянных условиях.
- Желательно взвешиваться в одно и то же время суток.
- Стойте прямо и спокойно.
- Лучше всего выполнять измерение по утрам, после принятия душа или ванны, хорошо высушив ноги.

При последовательном выполнении результаты измерений могут стать надежным средством контроля за изменением веса.

3.1 Элемент питания установка/замена

Прежде, чем ввести цифровые часы в работу, вставьте в прибор три входящих в объем поставки батареек на 1,5 В типа AAA, LR03 и одну батарейку на 1,5 В типа AA LR6 (для часов). Для этого откройте отсек для батареек ② на нижней стороне прибора и установите батарейки. Следите за правильностью расположения полюсов (указано в отсеке для батареек). Установите крышку отсека для батареек на место и прижмите ее, чтобы она зафиксировалась с характерным щелчком. Заменяйте батарейки, когда загорается символ разряда батареек "Lo" на дисплее ① или если на дисплее отсутствует индикация после включения прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ

- Батарейки не разбирать!
- При необходимости, перед установкой батареек очистить контакты в приборе и на батарейках!
- Разряженные батарейки немедленно удалить из прибора!
- Повышенная опасность вытекания электролита - избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза! В случае попадания электролита сразу промойте пострадавшие достаточным количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу!
- Если батарейка случайно была проглочена, немедленно обратитесь к врачу!
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно!
- Используйте только батарейки одного типа, не комбинируйте батарейки различных типов или использованные батарейки с новыми!
- Правильно вставляйте батарейки, учитывайте полярность!
- Отсек для батареек должен быть всегда тщательно закрыт!
- Если прибор долго не используется, удалите из него батарейки!
- Не допускать попадания батареек в руки детей!
- Не заряжать батарейки заново! Существует опасность взрыва!
- Не закорачивать! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
- Храните неиспользованные батарейки в упаковке. Во избежание короткого замыкания не храните их вблизи металлических предметов!
- Не выкидывайте использованные батарейки в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

3.2 Изменение единицы веса

Вы можете показывать вес в килограммах (kg), стоунах (st) или фунтах (lb). Настройте небольшим переключателем на нижней стороне прибора требуемую единицу измерения веса.

3.3 Настройка часов

1. Настройте время вращением колесика в отсеке для батареек.
2. Выньте батарейку, если Вы не пользуетесь часами.

3.4 Взвешивание

1. Установите весы на прочное основание. Все четыре ножки должны иметь контакт с полом. Неровный пол отрицательно сказывается на точность измерений.
2. Всегда измеряйте свой вес на одних и тех же весах, в одном и том же месте и в одно и то же время. Взвешивайтесь без одежды, до еды, лучше всего утром до завтрака.
3. Встаньте обеими ногами на весы, появляется индикация "**0.0 kg**". Во время процесса измерения весы значения сменяются, а индикация единицы измерения веса "**kg**" мигает. После стабилизации результата измерения индикация "**kg**" перестает мигать. Измеренный вес тела, например **65.1** (65 кг 100 г) появляется на дисплее на 6 секунд. Затем весы автоматически выключаются.



УКАЗАНИЕ

Если весы были перенесены или смещены, то Вы можете откалибровать их, слегка наступив одной ногой на платформу, пока на дисплее вначале не появится индикация "CAL", а затем "0.0 kg". Через 6 секунд весы автоматически отключаются.

3.5 Сообщения об ошибках

На дисплее могут показываться следующие сообщения о неисправностях:

Весы перегружены.

Батарейки разряжены и должны быть заменены.

Ошибка измерения.

4.1 Очистка и уход

- Выньте батарейки перед чисткой прибора.
- Не пользуйтесь агрессивными чистящими средствами и грубыми щетками.
- Очищайте весы только мягкой, слегка влажной тряпкой. Не используйте острые предметы или спирт.
- Вода не должна попадать вода. Не погружайте прибор в воду. Используйте прибор, только когда он полностью сухой.
- Не подвергайте прибор действию прямых солнечных лучей, оберегайте его от грязи и влаги.
- Не храните весы в вертикальном положении и вынимайте из них батарейку, если Вы долгое время не будете ими пользоваться. В противном случае грозит опасность вытекания электролита из батарейки.

4.2 Указание по утилизации



Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. Выньте батарейки перед утилизацией прибора. Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли! По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

4.3 Технические характеристики

Название и модель	: MEDISANA Весы электронные индивидуальные PSA
Электропитание	: Весы 4,5 В =, 3 батарейки по 1,5 В (тип AAA, LR03) : Часы 1,5 В =, 1 батарейка на 1,5 В (тип AA, LR6)
Диапазон измерения	: - 180 кг, 396 фунтов или 28 st
Шаг	: 100 г или 0,2 фунта
Автомат. отключение	: прикл. через 6 секунд
Размеры (Д x Ш x В)	: прикл. 30 см x 32 см x 4,9 см
Вес	: прикл. 2,2 кг
№ арт.	: 40435
EAN-номер	: 4015588 40435 1



В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.