




Planta Zen
TIME TO BE FREE

АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

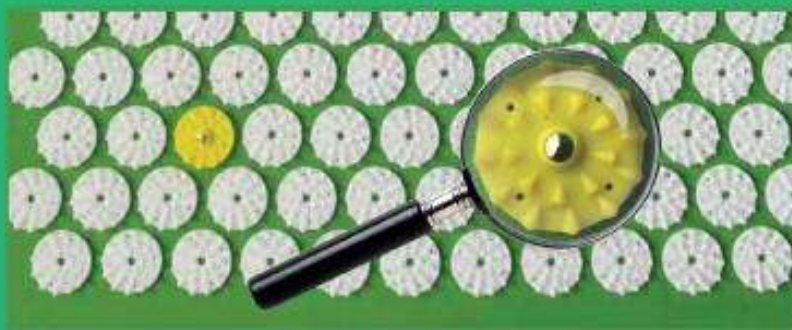


Еще до нашей эры люди имели представление об уникальной энергии магнита и магнитного поля: не было ни одной цивилизации, в которой магниты не применялись бы в какой-либо форме для улучшения здоровья человека. Глубоко проникающие магнитоэлектрические поля оказывают благотворное влияние на кровообращение, способствуют стабилизации давления, препятствуют возникновению мигреней, положительно влияют на мышцы и лимфатическую систему. Массажный коврик и подушка Planta Zen имеют 18 магнитов в области шеи, позвоночника и поясницы и усиливают действие акупунктурного массажа.



Акупунктурный массажный коврик оказывает положительное влияние на рефлекторные точки человека, благодаря чему и улучшает его самочувствие.

За счет стимуляции биологически активных точек ускоряются обменные процессы, из организма быстрее выходят накопившиеся шлаки, токсины, вредные жиры. Вдавливание иголок в тело оказывает расслабляющий эффект на мышечные ткани и способствует полноценному расслаблению мышц после физических нагрузок, появляется физическая и умственная бодрость, отступает чувство усталости. Стимулируются кровеносные сосуды и мелкие капилляры, что способствует улучшению кровоснабжения. Вместе с кровью по организму разносятся полезные вещества и кислород. Запускаются процессы способствующие похудению, что позволяет скорректировать фигуру и избавиться от целлюлита.


Выполнять акупунктурный массаж рекомендовано в вечернее время суток. Это поможет расслабиться перед сном и улучшить качество сна.

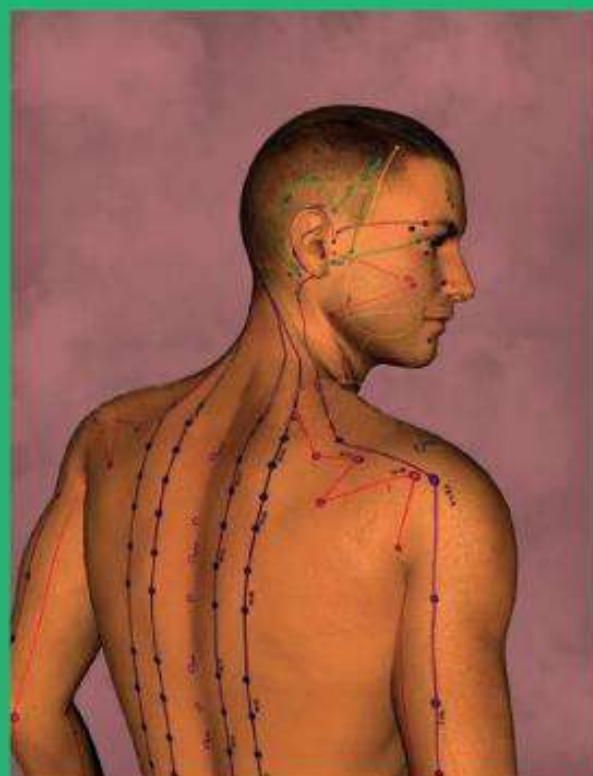

www.planta.ru.com



#planta_beauty

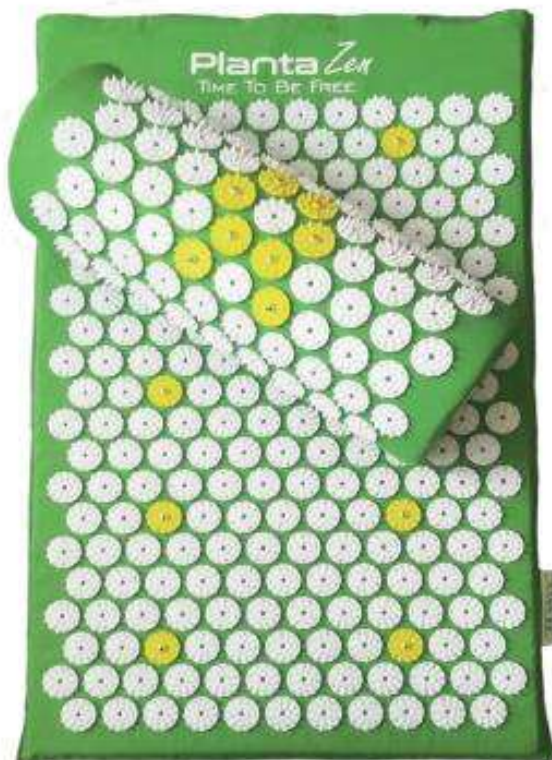

АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ - КОВРИК И ПОДУШКА Planta Zen создан для массажа спины, шеи, плеч, поясницы, бедер, живота, ступней и ладоней и других частей тела.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Вы можете ощущать приятное покалывание и тепло уже с первого использования акупунктурного коврика Planta Zen, но большинству людей требуется от 3 до 7 дней на привыкание – мы рекомендуем начинать сеансы массажа с комфортного для вас времени – 1-2 минут для первого раза будет достаточно. Если у вас очень чувствительная кожа и вы испытываете дискомфорт при контакте с острыми аппликаторами, используйте Planta Zen в тонкой хлопковой одежде. Для достижения заметного результата потребуется от 5 до 30 сеансов массажа в зависимости от индивидуальных особенностей.

Для достижения наилучшего результата в избавлении от целлюлита мы рекомендуем использовать Planta Zen каждый день в течение первого месяца. Вы также можете использовать массажный коврик так часто, сколько сочтете необходимым.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Положите коврик Planta Zen на кровать или на пол. Используйте на голое тело или в тонкой майке, если у вас чувствительная кожа. Медленно и осторожно ложитесь спиной на массажные элементы. Согните колени и прижмите их к животу так, чтобы прижать поясницу к коврику. Вы можете оставить ноги согнутыми или выпрямить их. Используйте Planta Zen вместе с подушкой, чтобы достичь лучших результатов. Мы рекомендуем лежать 15–20 минут каждый день. Таким образом можно массировать затылок, шею, плечевой пояс, всю поверхность спины и ягодицы одновременно. Поместите подушку Planta Zen под поясницу, чтобы воздействие было более интенсивным.

УХОД И ХРАНЕНИЕ:

Коврик Planta Zen должен храниться в сухом месте, где исключено попадание на него прямых солнечных лучей. Не допускается стирать коврик в стиральной машине и сушить его с использованием центрифуги. Химическая чистка коврика не допускается. Только ручная стирка тканей в холодной или теплой воде. Перед стиркой вытащите внутренний матрас. Для очистки аппликаторов "цветков жизни" используется мягкая щеточка и натуральные моющие средства. Не допускается хранить коврик в сложенном положении лотосами внутрь, ставить на коврик тяжелые предметы, садиться в плотной одежде, которая может повредить лотосы, а также наступать на него в обуви.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ:

Не рекомендуется использовать массажный коврик для массажа лица, груди и внутренней поверхности бедер.

Дети до 10 лет должны использовать Planta Zen под присмотром взрослых. Не рекомендуется использование во время беременности.



в комплекте:

КОВРИК

Массажные аппликаторы:
100% "eco-friendly" HIPS пластик
Магнит 4100GS
Наполнитель:
100% синтепон
Чехол: 100% хлопок
Размер: 68x42x2 см

ПОДУШКА

Массажные аппликаторы:
100% "eco-friendly" HIPS пластик
Наполнитель:
100% синтепон
Чехол: хлопок 100%
Размер: 37x15x10 см

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 100% нейлон



АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ Planta Zen

Модель: PZ-SET1

Изготовитель:

«Нинбо СКМО И&Е Ко., Лтд», адрес 1502, Нингшанг Билдинг, 666 Джиянган роуд, Йинжау дистрикт, Нинбо 315040, Китай
Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркет», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605

Гарантия 3 года. Срок службы 10 лет.

Дата изготовления указана на упаковке

Служба сервисной поддержки потребителей; www.planta.ru.com, тел. +7 (499) 703 04 95

Товар не подлежит обязательной сертификации